

wish[®]
to GO
by SYNOIA

SYNOIA
Technologies Ltd

הוראות שימוש



wish[®]
to GO
by SYNOIA

יצרן: ב.ד.ר טכנולוגיות בע"מ
כתובת: רח' החרש 6, נס ציונה, ישראל
B.D.R Technologies L.T.D
6Heharash st. Nes-Ziona, ISRAEL 7403113



Website



הפניה למדריך ההוראות

מדריך זה מתן מנגנון בכיניות יוצרים. כל הזכויות שמורות, אין לשכפל חלק
מפרסום זה או להפיצו בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא ללא הסכמה מראש.

אם נמצא פגם ב מוצר במהלך תקופת האחוריות, נא ליזכר קשר עם
הספק המקורי לתיקו או החלפה.

מוצר זה מיועד לשימוש ביתני בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי.
אם הוא משמש למטרות מקצועיות או מסחריות, האחוריות לא
תכסה זאת.

כל מוצר פגום עשוי להיות מוחלף במוצר דומה הזמין בזמן החלפה.
אהוריות אינה מכסה מוצרים שימושיים מהסיבות הבאות:

- תיאונה, שימוש שלא לפי ההוראות, שימוש למטרה שונה שוננה מזואת.
- שימוש המכשיר או יצוע שירותים במכשיר.
- תיקון על ידי אנשים שאינם מומשימים.
- שימוש בబיצורים שאינם מורשים.
- חיבור לרום או למתח גבוה.
- כלנסיבות אחריות שאינן בשילוטנו.

ל Synoia Technologies Ltd, לייצן ולספק לא תהיה חובה בגין
נסיבות מקרים, מיחדים או עקיפים הנובעים מהשימוש במוצר זה.
למעט אם נקבע אחרת בוקל, סכום הבעות הכול של Synoia Technologies
Technologies, לייצן והספק לא יהיה על מחור הרכישה של מוצר
זה.

כל אחוריות מכלול'א אינה חלה ולא תחול כלל, בין היתר, כל אחוריות
מכולה ללחוריות או האממה לכל שימוש, בכפוף לחוק החקל.

תוכן העניינים

הפניה למדריך ההוראות.....	2
അמצעי זהירות לבטיחות.....	3
אודות Synoia Co. Ltd BY SYNQIA.....	10
הורות שימוש.....	13
הילך טיפול.....	14
בעיות נפוצות ופתרונות.....	17
תיאור קוד השגיאה.....	18
מפורט טכני	20
אישור תקינה	21
הצהרת תאימות לתקנות רשות התקשורות הפדרלית בארה"ב	22
(FCC) בעניין תדר רדיו	23

אמצעי זהירות לבטיחות

- טלנגייאקטזיות הנורמות מתפרק ל��וי של הכבד עקב שימוש ארוך טוח בהורמוניים סטרואידים.
- דלקת עור מגע (קונטקט דרמטייטיס) וכו', או היסטוריה של חחלת עור.
- וסת פוליה.
- יצירוף פעול של חלב אם.
- אלרגניה למתקחת.
- הרגשה לא טוביה וחום.
- פצעים, אקזמה ונpsiות בעור.
- אנשים עם בעיות בעור כגון דרמייטיס, כוויות שם חריגות וכו'.
- טיפול שניים פעיל הפרעה במפרק ההלס-ירקתי (TMD).
- בעיות רפואיות משניות (הוצאה של בעיות קודומות) בעיניים ובראש הנורמות על ידי אינזנורות רדרכים וכו'.
- הפרעת דימום, המופilia וחיריגות דם אחרות.
- נסירה להיווצרות כמימות סוגלים.
- מללה.
- לאחר שתיטת אלכוהול, אנשים שנוטלים תרופות, עיפויות חמורה.
- נטילת כדורי שינה.
- מחלות חום, מחילות יהומיות ומחילות פנימיות.
- חחלת לב.
- נוכחות של קוצב לב מלאכותי או דיפיברילטור פנימי בגוף.
- שתלים ממכתיים באזורי הטיפול (הרעה: סטימות בשיניים או שתלים דנטליים הם מותרים).
- סרטן עור או היסטוריה של סרטן עור – שומות טרום סרטנית.
- מוגרת חיזונית פגונה.
- כל מחלת עור באזורי הטיפול - כגון פצעי קור, פسورיאזיס, אקזמה או פרחה.
- רגישות ליגוריות תרמיים.
- הצלולות או תקופת רפואי פצעים.
- כיבים בעור, ריפוי לקוי של העור, עור יבש וגריש.
- מחחלת קלית.

חשיבות להקפיד לפחות למשך זמן ניק למשתמשים או אנשים אחרים לפני ואבדון רכוש. הרשימה זו אינה מלאה בשום פנים. אם יש לך שאלות אחרות, יש לפנות לטסיע רפואי. אם יש לך בעיה רפואיית או שתהה נזלת תרופות ואין בטוח האם אתה יכול להשתמש במכשיר זה או לא, אנא פה לטסיע רפואי.

טיואר תווית האזהרה

מכשיר זה אינו מתאים לכלולים. קרא בעין את האזהרות הבאות שקובל האם השימוש במכשיר מתאים לך.

יש לשמור תמיד את המכשיר במקום שגנש בקהלות לעיון.

▲ איסור אזהרות

● כללים שחייב לפעול לפיהם ● הערה ▲

▲ אזהרות ● כללים שחייב לפעול לפיהם

● ניתן להשתמש במכשיר רק עם ראש טיפול מתרפק
וקפסולת החד-פערמיה.

○ אסור להשתמש

אין להשתמש במכשיר זה בנסיבות הבאות
• ילדים עד גיל 18.

• אנשים שאינם בעלי החזקי המתחאים לשימוש
במכשיר מסובך זה מוגבלים.

• בטוחה של 24 שעות לפחות שתיית אלכוהול בכמות מרובה.
• הפרעה עצבית בפנים, ליקוי חושי בעור, נתיחה לאלגיות.

• מחילות עור ואוטופיק דרמייטיס, עור רגיש.
• ניתוחי פטם והכוונים שימוש במילוי מוגנת, סיליקון או
פלסטיק עקם שבר או יצוב מחדש של הפנים.

אסור להשתמש

- אנו אל תשתמשו/**במכשור זה אם אתה גוט**
- את התروفות הבאות:
- תרומות לטיפול בעיות הקשורות ללחץ דם או לב
- תרומות לטיפול בחרדה, דיכאון וכϋיפורניה,
- דוחות שינה ומצבים אחרים של בריאות הגוף
- תרומות לטיפול בעיות עור כגון אקנה או פסוריואיזם
- תרומות לטיפול בזיהומים חידקמים, פטריותים או נגיפיים
- תרומות המשמשות להקלת על כאבים ונפיחות, כולל
- תרומות לטיפול באלגיות
- תרומות לטיפול במalaria או ממעטה.
- תרומות לטיפול באפלסיה
- תרומות לטיפול בעיות קיבת
- אם אין בטוח האם אתה יכול להשתמש במכשור זה,
יש לפנות לשיער רפואי.

כללים שחוובות לפועל לפיהם

- בהתיקים הניסיונות הבאות, עלייך להתייעץ עם הרופא שלך
לפני שתתחיל/i להשתמש במכשור זה:
- דאגנה מ מצב העור שלך בעת השימוש במכשור
 - ג'ידולים ממאיירים
 - הפעעה לבביה
 - סוכרת ומחלות אחרות הגורמות להפרעה חמורה במחזור הדם ההיקפי,
וכתוצאה מהן לילקוי תפיסת
 - טמפרטורת גוף מעל $^{\circ}\text{C}38$ (בזמן מחלה חום) כגון: תקופות של דלקת
הריפה עם טסמייניט חמורים (עייפות, צמרמוות, תנודות בלוץ הדם,
וכו'), כגון: חולשה פיזית
 - צורך בדנוחה
 - לחץ דם לא תקין עם ניראלגיה (כאב עצבי) בפנים
 - הפעעה חמורה בזרימת דם
 - אוסטאופרוזיסים, שבר בעמוד השדרה, נקע, מתיחה שריריים ועוד
מצבים ורפואהים חריגיים הקשורים לכך.
 - ניתוחים בעבר

- טיפול כירורגי כלשהו כגון חידוש פניו העיר בלבד
- או פוליגון רימי מעקב באוצר הטיפול במהלך
- 3 החודשים האחרונים או בזמן הלחמה מעתיך זה.
- 3. שחזור שנ (תמונה) קבוע באוצר הטיפול, אך להתייעץ עם הרופא
- לפני תחילת הטיפול אם יש לך סימנות זמניות באוצר הטיפול.
- עור שביר או ייש במיוחד עקב נזילת הרופה, תכשיטים חמניים,
וITEMINIIM או תומסfine מזון.

אסור להשתמש

- אין להשתמש במכשור זה באזרום הבאים
ובנסיבות הבאות:
- מלחה חריפה
- אזרום שבاهו דק יותר (מעל העצמות)
- לחץ דם לא תקין
- אקנה
- גידול ממאייר
- בכיבוי ארכובות העיניים
- שחפת
- ליד הלב
- שמנה בלוטת
- מחלות דם
- אזרום שבاهו בוצעו نتيוחם פלסטים
- מחלת חום
- העופעויות, גלגלי העיניים
- חלה זיהומית
- הגרגרת
- מחלת קרבאים
- ברוך הפה, הנרתיק, רקמות ריריות וכו' .
- חתכים בעור
- אזרום שבاهו הושתיילו שתליים דנטליים
- בלבות ניפית



אסור להשתמש

• אין להשתמש במקשר בטופרоторות גבוות המחבר עליל לעליות באש והחומר ולורם לכווית למשתמש.

• אין לאפשר לתינוקות ולילדים להשתמש במקשר זה או לשחק בו כדי למנוע פציעות ואירועים.

• אין לחابر או לתקן את כבל ה-USB בידיהם ורטובות כדי למנוע פציעה או התחששות.

• אין לפגוע בכבל ה-USB, לעבד אותו, לכופף אותו, למשוך אותו או לסובב אותו כביכול דורך.

• אין להזמין פעיצים כבדים על גבי כבל ה-USB למשתמש החשמלי או קצר חשמלי של כבל ה-USB, דבר שעלול לגרום לשရיפה וכוכ.

• אין לאפשר לשכב בכבב ה-USB להיכר סביבם כפוץ הרגליים או האצוואר כדי למנוע פציעות ואירועים.

• אין לטבול מכשיר זה במים כדי למנוע התחששות או קצר חשמלי של המכשיר, דבר שעלול לגרום לשရיפה וכוכ.

• אין למקם את המכשיר בגבוקות שבdom הוא שwonף לאור השימוש מושך זמן רב או ידי תונן או מקומות אחרים בטופוטורה גבוהה כדי למנוע שריפה או תקללה במכשיר.

• אין לאפשר לאלקטודה לגעת במכשיר כדי למנוע תקלות במכשיר או פציעות.

• יש להרחיק את המכשיר מהשיג ידם של תינוקות ילדים ולהרחיק אותו מטיעות כדי למנוע פציעות ואירועים.

• ימנע מטיעת המוצר באור שמש ישיר.

• ימנע מהאחסון המוצר באור שמש ישיר.

• אין לחשוף את המוצר למגנטור או לקרני רנטגן.

הערה ▲

- יש להימנע משימוש או שימוש בunities בunities שיזוף במהלך השימוש בו לאחריו.
- יש להמתין 24 שעות לפחות לאחר השימוש במקשר לפניות המוצר או בשמיים.
- לפניה השימוש במוצר הלבנה או בשמיים.
- לא מומלץ להשתמש במוצר על משחה מחוספס.
- אם הנוזל מטפס מהמקסולה, הלחץ המופיע על הקפסולה גבוה מדי. יש להוציא מטה על הקפסולה אם יש בכך צורך.

הערה ▲

- ### ביטחונות חשמלי
- אם לא נעשה במקשר שימוש במשך זמן רב, יש לטעון אותו אחתอาท לשליטה חודשים. פריקה מלאה תוביל לתקלה בסוללה.
 - אין להשתמש במקשר אם אוור נזק, כגון מעטפת סודקה, שברם במכשיר, שבטים בראש הטיפול, משען פגום וכו'.
 - אין לכרוך את כבל החשמל סביב המטען בזון האחסון, הבהיר עלול לנגרם לכלב ומשל מוקדם.
 - אין למתוח את כבל החשמל, לכופף אותו בזווית גבוהה מאור או לאחסן אותו כירוך סיבי המכשיר, דבר שעלול לנגרם נזק לכלב ומשל מוקדם.
 - אין להשתמש במקשר אם המטען החשמלי או המקשר חמים מדי.
 - אין להפעיל כוח רב מדי על הלחיצים או ללחוץ בחזקה על הצג.
 - אין לפוך את המכשיר.
 - אין להשתמש באביזרים לא מאושרים.
 - לא ללחוץ על לחצני הדיות באמצעות עצמים חדים.
 - יש להרחיק את המכשיר מהפה ומהעיטים בעת השימוש.
 - יש להשליך את הקפסולה בהחאים להזקם והתקנות של המדינה או האזרע שהם אותה נמצאת.
 - יש להשתמש רק בכבל החשמל ובסוף הכוח המאושרים שסופקו עם המערכת.

אין לחבר את כבל הטעינה למכשירים אחרים

הינו מכשיר חד-שלבי לטיפוףuario המשלב שני טכנולוגיות מוכחות.
אם אתה משתמש במכשיר היחיד עם כפוסולת, דרישות רק
7-15 דקות להשגת אפקטים רצויים מסוימים.

כללים שוחבה לפעול לפיהם

מכשיר זה עשויה שימוש בטכנולוגיית RFID ליזיהו אוטומטי של כפוסולת הטיפוף.

לפיכך, מודול ה-RFID הוא חלק מהמורת המכשיר.
אפשרון לתקן או לבצע שינויים במודול והיפוך את המכשיר
בלתיישמיש ותוביא ביטול האחריות של Synoia וחוזה השירות.

כללים שוחבה לפעול לפיהם

הקפסולה מיועדת לשימוש חד-פעמי בלבד. הן המכשיר והן הקפסולה
מקודדים. יש לרכוש את הקפסולה מספק מורשה של Synoia באזורי.

כללים שוחבה לפעול לפיהם

אין להסריך את ראש הטיפוף או הקפסולה כאשר המכשיר נמצא
במצב "מופעל".

אנא קרא בעיון את ההוראות לפניה השימוש במכשיר.

ל מגיעת מואנות, אין לבצע פעולות אחרות בעת השימוש במכשיר זה
במכשיר או פיצויות.

אין להפali את כבל USB במקורה של המורת שהמצאות פינים או אבק בשקע.
כדי להונע התהשלהות או קדר חשמלי בכבל ה-USB, דבר
שקלול לגורום לשידקה וכו'.

אין להשתמש במכשיר כדי לוחות מקרמים או תחליבים.
הזרב עלול לגרום לפיצעה במכשיר שהמוכרו ונופל מהידיים.

אין להפali כוח מפורץ בתן השימוש במכשיר והזרב עלול
להגביר את הנטול על העור ולגרום נק לעור ולמכשין.
כדי למנוע עמשת יתר, דבר שעלול לגרום ליתוק ואז ל��ר חשמלי,
לשידקה וכו'.

מללא לבודקה מקידמה: לפני השימוש במכשיר, יש למרוח כמהות קטנה
ההפרומלה על אוור קטן בפרק כף היד לדידית וריגשת לריכבים.

אם מתעורר גירוי או אי נוחות, יש להפסיק את השימוש מיד.
יש להימנע שימוש בקסולה בקסולה אם החומר שלא נperf.

יש להימנע שימוש בקסולה אם היא מראה סימני שינוי צבע חום.

◀ **ازהוֹת**

אם אתה סובל מאו-נוחות בעור (כגון הת חממות העור,
אדרמומיות, אקומה, גירוד, עקצוץ וכו').
יש להפסיק את השימוש במכשיר באופן מיידי ולהתייעץ עם רופא.
מולץ להשתמש בקרם הגנה עם מקדם הגנה SPF 30 בעטת
חשיפה לאור השמש לאחר השימוש במכשיר.

שמות החלקים

כולם:

1. בסיס טעינה

2. דית

3. ראש טיפול:

a. ראש טיפול זהוב

c. ראש טיפול ירוק

4. כבל חשמל



b



a




מסך LCD




שליטה בעוצמת המכשיר

- ◀ לחץ על הלחצן הימני כדי להגבר את העוצמה
- ▶ לחץ על הלחצן השמאלי כדי להנמיך את העוצמה

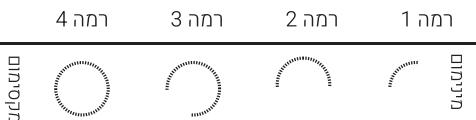

הליך הטיפול

- יש להכין את אזור הטיפול: להסרה את כל התכשיטים כדוגן עגילים, שרשרת ומכנסים.
- יש לנוקות את אזור הטיפול: להסיר איפור ולודוא שהעור באזור יבש ונקי.

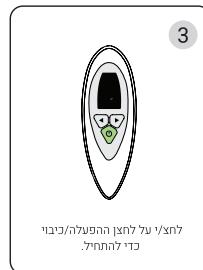

הוראות שימוש

לפני הטיפול יש לבצע בדיקת עור
נא לחקוד לבצע את הבדיקות הראות בעת השימוש הראשון
במיכנש על מנת למנוע בעיות בעור.

הערה ▲

במקרה של חום חריג, אדומותיות, אקזמה, גירוד, גירוי או כל חריגת אחרת באזורי הבדיקה, יש להפסיק את הבדיקה באופן מיידי.
אין להשתמש במיכנש במקרה של חריגת בעור.

נקה את העור
השתמש/ סובון כדי לשטוף את הצד הפנימי של הזרועות
ואז יבש/ אוטן במוגבת.
יש לבדוק כל גבוי הפנימי של הזרוע בהתאם להנחיות בטיפוליים
הבאים (1-4). מומלץ להתאים את העוצמה לrama הנמוכה
ביוור במהלך הבדיקה.
את/ה יכול/ה להתחילה להשתמש במיכנש אם אין ריריגות בעור
(אדומותיות וחום) ב-24 שעות הבאות.

• תחזוקת המכשיר

יש לפרק את ראש הטיפול מהמכשיר לאחר הטיפול. יש לנגב את כל המשטחים של ראש הטיפול והמכשיר עם מגבוי אלכוהול 70% ומעלה. יש להרחק את מגבון האלכוהול מהמכשיר לאחר השימוש כדי לא פגוע בשילוחות המוצר. יש לוודא שהמכשיר נטען כראוי ע"ז בדיקה שאינדיקטית "ChrG" מופיעה על המסך.

• פיתוח סוללה נעולה

המכשיר בודק את קיובולת הסוללה כל הזמן. בזמנים מסוימים, עקב שימוש שגוי, רמת הסוללה עשויה לרדת מתחת למינימלית. במקרה זה, הסוללה נעלמת באופן אוטומטי כדי להגן על עצמה.


יש לבצע את האcedures הבאים כדי להפעיל מחדש את הסוללה לאחר נעלמה:



יש למשוך להנחתו את החסימה ולתוקן את הרוחנית על מסוף הטעינה, ואנו שונן הסוללה באמצעות גדרת נזק. אולם גדרת נזק לא יכולה להונחה על הדרין.



לחותי והנתקן את החסימה שפאלגה. אם הינה בשתי הדיסקים לפחות 10 שניות בוגרנו, אז, אנו מטען נזק אין נזק.

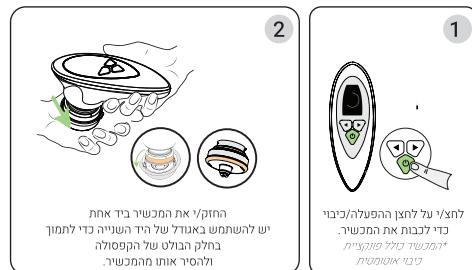

לחצץ על חצץ הפעלה/כיבוי כדי לבודק את המכשיר לשימושו של הרד השונייה בלבד ולוסר אוטומטי מהמכשיר.



לאחר מכן להחזיר את המכשיר לבסתו.



יש לנגב ולנקות בגדרת נזק.

*הצעדים מיועדים להגשה בלבד

• כללי שוכבה לפועל לפיהם

הקפסולה מושעת לשימוש חד-פעמי בלבד. בסיום הטיפול, יש להסיר את הקפסולה המשומשת ולהשליך אותה לפח.

תיאור קוד השגיאה

אם מתרחשת תקלה, קוד הודעת שגיאה יופיע באג LCD.
הטבלה הבאה מတדת סוגי שגיאות אפשריים ופעולות מומלצות:

פעולות	שםות השגיאות	קוד שגיאה
<ul style="list-style-type: none"> יש לבדוק את חיבור המטען לאג LCD. את לחצן הפעלה/כיבוי לפחות 5 שניות. את לחיזוקו של מטען. אם הודעה זו עדין מופיעה, יש ליצור קשר עם התמיכה הטכנית. 	אין טעינה	E01
<ul style="list-style-type: none"> יש להסרר את המכשיר מהטען. אם הודעה זו עדין מופיעה, צויר קשר עם התמיכה הטכנית. 	טעינה יתרה	E02
<ul style="list-style-type: none"> יש להסיר את המכשיר מהטען. את לחצן הפעלה/כיבוי לפחות 5 שניות. יש למתמzn 10 שניות ולאחר מכן לחזיר אותו לפחותן. אם הודעה זו עדין מופיעה, צויר קשר עם התמיכה הטכנית. 	התקלה בסוללה	E03
<ul style="list-style-type: none"> יש להפסיק את התמיכת ולכבות את המכשיר. יש לוודא שאין חפצית מתכת המתחברים למכשיר או סמכוכים ולוחתיל שוב את הטיפול. אם הודעה זו עדין מופיעה, יש ליצור קשר עם התמיכה הרכנית. 	תקלה במנוע	E04
אם יש תקללה חשמלית, יש להרחוץ לחיצה על לחצן הפעלה/כיבוי לפחות 5 שניות כדי לכבות את המכשיר, ולאחר מכן ליצור קשר עם התמיכה הטכנית.	בעיית חשמל	E05
יש ליצור קשר עם התמיכה הטכנית	תקלה PF בלבד	E06

ניהול סוללה:

- איקון סוללה מהבהב: אם איקון הסוללה מהבהב, יש לחבר את המכשיר למטען באופן ישיר.
- הודעת תצוגה "GhrG" אם "GhrL" מופיע על המסך בעת ניסיון להתחיל טיפול מלא. יש לטען את המכשיר במלאו לפני התחלת הטיפול.

בעיות נפוצות ופתרונות

יש להשתמש בהנחיות הבאות בתחליה כדי לנסוט לפטור

כל בעיה שעשויה להתרחש בזמן השימוש במכשיר.

אם אורה/ת נתקל/ת בעיות סדירות אחרות שאינן מופעות כאן,

נא ליזור קשר עם הספק או שירות התמיכה המקומי לקבלת עזרה.

בעיות	נסיבות אפשריות	פתרונות
לא ניתן להפעיל את המכשיר	סוללה ריקה למשך 6 שעות	טענה/ את המכשיר למשך 6 שעות
	חכוך החשמל של מסנן וטענה/ את הסוללה במשך 6 שעות וכונצאה מכך הסוללה אינה נטענת.	חכוך החשמל של מסנן וטענה/ את הסוללה במשך 6 שעות וכונצאה מכך הסוללה אינה נטענת.
	הקפסולה משמשת או אינה פועלת.	הקפסולה חדשה במכשיר או אינה פועלת.
השאהיה פתאומית	לחצת בטשות על לחצן הפעלה/כיבוי	לחצן/ שוב על לחצן הפעלה/כיבוי

מפרט טכני

הकפסולה	המכשור		
12-30 °C	20-35 °C	טמפרטורה בבירה וטמפרטורת טעינה	תנאי הפעלה
20-50%	10-100%	לחות יחסית לחץ אטמוספירי	
700-1060hPa	700-1060hPa	טמפרטורה דרישה בחקסון	תנאי אחסון
12-30 °C	20-30 °C	טמפרטורה דרישה בחקסון	
20-50%	10-100%	לחות יחסית לחץ אטמוספירי	
700-1060hPa	700-1060hPa	טמפרטורה דרישה בchapson	
100V-240V ~ 50/60Hz 5VA			חשמל
10-40 °C 15-60% 700-1060hPa	10-40 °C 10-100% 700-1060hPa	דרישות טמפרטורה/לחץ/ יחסית/לחץ/ אטמוספירי בשינוי	תנאי שינוי

קודם השגיאות שגיאה	שםות השגיאות שגיאה	അמצאים
E07	רמות הsolella עם התמיכה הטכנית חווי שנו של	רמת הסוללה איננה ידועה, יש ליזור קשר
E08	החלף קפסולה קריאת טבואה של קפסולת WishPro	
E09	התקדמות יתר על סעינה הסר את המכשור מהטען וטען אותו	מחדש לאחר התקරנות
E10	Void	הקפסולה איננה תואמת לדיית

חשמל:

משך הפעימה	תדרות חזרות הפולס	marshutat chzrot hpolim	
60 מיקרוניות	15.1kHz	5V	דיית
	92.5Hz	19.1Vrms	ראש הטיפול

קטגוריות

מטען - מכשיר בקטgorיה II

דיית - מופעלת באמצעות סוללה פנימית



הידית, ראש הטיפול

- WishPro ESSENCE - חלקיים מסיוג BF



דרגת עמידות במים:

• IP50 - מטען

• IP63 - דיית

• IP65 - ראש הטיפול

תכונת בטיחות

סימון CE על אריזת ראש הטיפול
מתיחס רק לרכיבים האלקטרוניים
בראש הטיפול, והוא אינו כולל את
החומרים הקוסמיים בראש הטיפול.

• IEC 60601-1-11 IEC 60601-1 3.1 edition •

• IEC 60601-1-6 IEC 60601-2-10 •

• IEC 62304 IEC 60601-2-57 •

• IEC 62471 IEC 62366 •

אוסטרליה וניו זילנד

AS/NZS 3200-1-0

CAN/CSA C22.2 601.1-M90

EMC

IEC 60601-1-2 • מהדורה רביעית

CISPR 11 •

IEC 61000-3-2 •

סיכון Gold TeH

1. הנחת אלקטרודוט סמוך לאזורי החזה עשויה להעלות את הסיכון לפיברילציה קרדיאלית.
2. הפעלה בקרבת ציוד טיפול נגלי רדיו קצרים או מיקרוגל עלולה לגרום לאי יציבות בפלט הגירוי.

פרמטרי אלקטרודות Gold TeH

אלקטרודה מצופה זהב – Gold 997 – קוטר חיצונו 3.2 מ"מ

הצהרת תאימות לתקנות רשות התקשרות הפדרלית בארה"ב (FCC) בעניין תדר רדיו

הפרעה

לפי חלק 15 של תקנות FCC: מכשיר זה נבדק ונמצא עומד בתנאים

הנדרשים עבור מכשירים דיגיטליים מסווג B.

מגבילות אלה נועדו לספק הגנה מספקת מפני הפרעה מזיקה למכשירים באזורי מגורים.

מכシリ זה ייצור, משמש ומרקן אנרגיה בתדר רדיו, התקינה או שימוש שלא לפי הוראות עלולים לגרום להפרעה מזיקה לתקורת רדיו.

עם זאת, אין עורובה לכך שהפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת.

אם המכשיר גומט להפרעה מזיקה בקליטת אוניות רדיו וטלזיה, שניתנת לבירור על ידי כיבוי והפעלה המכשיר, אז המכשיר יוכל לנסוט לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהצעדים הבאים:

- שינוי היכיון או המיקום של האנטנה הקולטת.
- הרוחקת המכשיר מהמקלט
- חיבור המכשיר לשקע חשמלי שונה מה שאליו מחובר המקלט.
- והייחוץ עם הספק או עם טכני רדיו/טלזיה מנוסה לקבלת סיוע.
- במקומות מסוימים, המכשיר עלול להפריע לקליטת אוניות רדיו. אינה אחראית לכל הפרעת רדיו או תקשורת הנגרמת על ידי Synoia המכשיר./Shaw שינויים בלתי-מורשת במכשיר עשויים להביא לביטול האחירות.

FCC

FCC ID:ZA1-SYNOI AWISHA01

חלק 15 של תקנות רשות התקשרות הפדרלית בארה"ב FCC תחת-חלק C חלק 18 של תקנות FCC

الرجوع إلى دليل التعليمات

© سينوفيا، منذ 2009
هذا الدليل محمي بموجب حقوق النشر. جميع الحقوق محفوظة؛ لا يجوز استنساخ أي جزء من هذا المنشور أو نشره بأي شكل أو بأي وسيلة دون موافقة سينوفيا.
إذا تم العثور على عيب في المنتج خلال فترة الضمان، يرجى الاتصال بالبائع المحلي للإصلاح أو الإستبدال.

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط وليس مصمماً للاستخدام التجاري.
إذا تم استخدامه لأغراض مهنية أو تجارية، فإن الضمان لا يغطيها.

يمكن استبدال أي منتج معيب بمنتج آخر مماثل متاح في وقت الإستبدال.
الضمان لا يغطي المنتجات التالفة بسبب الأسباب التالية:

- الحوادث وسوء الاستخدام والإساءة والتغيير.
- تم إصلاحه من قبل أفراد غير مصرح لهم.
- يستخدم مع ملحقات غير مصرح بها.
- متصل ببيان أو جهد غير صحيح.
- أي ظروف أخرى خارجة عن إرادتنا.

.. الشركة المصنعة والبائع ليست مسؤولة عن أي أضرار عرضية أو خاصة أو غير مباشرة الناشئة عن استخدام هذا المنتج.

ما لم ينص القانون المعمول به على خلاف ذلك، لن تتجاوز المسؤولية الإجمالية لشركة Synoia Technologies والشركة المصنعة والبائع سعر شراء هذا المنتج.

يتم إخلاء المسؤولية عن جميع الضمانات الضمنية ولن يتم تطبيقها بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمني لقابلية التسويق أو الملاءمة لأي استخدام، وفقاً لقانون المعمول به.

المحتويات

الرجوع إلى دليل التعليمات.....	2
تدابير السلامة.....	3
حول  تعليمات التشغيل.....	10
دليل العلاج.....	13
المشاكل والحلول المشتركة.....	16
وصف رموز الخطأ.....	19
المواصفات الفنية.....	20
التوثيق واللوائح.....	22
بيان الترددات الراديوية للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)	23
25	

تدابير السلامة

- توسيع الشعريات الناجم عن خلل في الكبد بسبب الاستخدام طول الأمد لهمنوتنس الستيرويد.
- تعانى من التهاب الجلد التماسي، وما إلى ذلك، أو لديك تاريخ من الأمراض الجلدية
- فترات الحمى
- أشأء الرفقة
- حساسية من المعادن
- الشعور بالسوء والحمى
- وجود جروح وأكزيما وتورم في الجلد.
- أولئك الذين يعانون من تشوّهات الجلد مثل التهاب الجلد، حروق الشمس المفترضة، الخ
- عندما تتعافى أنسنانك
- اضطراب المفصل الصدغي الفكري
- معاناة من عيوب في العين والرأس التي تنشأ عن حادث المotor، الخ
- المعاناة من اضطرابات التذبذب، والهموفيليا، وتشوهات الدم الأخرى
- عرضة للإصابة بابقاع الأرجوانية
- المعاناة من الكلف
- بعد شرب الكحول، أو تناول الدواء حالياً.
- وفي التعب الشديد
- تناول الحبوب المنومة
- المعاناة من أمراض الحموية، والأمراض المعدية، والأمراض الداخلية
- أمراض القلب
- لديك جهاز تنظيم ضربات القلب الاصطناعي أو مذيل الرجفان الداخلي في جسمك
- إجراء زراعة معنية في منطقة العلاج (ملاحظة: حشوات الأسنان أو زراعة الأسنان هي لاستثناءات)
- سرطان الجلد أو تاريخ من الشامات السرطانية لسرطان الجلد
- ضعف جهاز المناعة
- أي مرض جلدي في منطقة العلاج مثل البرد، القroup أو السدفية أو الأكزيما أو الطفح الجلدي.
- حساس للمحفزات الحرارية
- تندب أو فترات التئام الجروح
- تقرحات الجلد، وضعف شفاء الجلد، والجلد الجاف والحساس
- مرض كلوي

تأكد من الامتثال للمقتطبات التالية قبل الاستخدام لتجنب الإضرار بالمستخدمين أو غيرهم من الناس، فضلاً عن الخسائر في الممتلكات. هذه القائمة لا تشمل جميع الحالات المحتملة، إذا كان لديك أي سؤال آخر يرجى طلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني من حالة طيبة أو تتناول أدوية ولم تكن متاكداً ما إذا كان يمكنك استخدام هذا الجهاز أم لا، فيرجى طلب المساعدة الطبية.

وصف لصافة التحذير

هذا الجهاز غير مناسب للجميع.


اقرأ التحذيرات التالية بعناية وفكّر فيها إذا كان يمكنك استخدام الجهاز أم لا

احتفظ دائمًا بدليل التعليمات في مكان يسهل الوصول إليه للرجوع إليه.



تحذيرات

الحظر

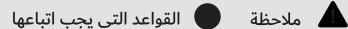

القواعد التي يجب اتباعها

ملاحظة



تحذيرات

القواعد التي يجب اتباعها

لا يمكن استخدام الجهاز إلا مع رأس تكنولوجيا قابل للفصيل وكيسولة قابلة للاستعمال مرة واحدة WWR to 0.5ML.

لا يجوز استخدامه

لا تستخد هذا الجهاز في الحالات التالية
· أطفال

· أصغر من السن القانوني المناسب لاستخدام ذلك النوع من الجهاز في بلدك

· إذا كنت حاملة، يرجى استشارة الطبيب

· خلال 24 ساعة بعد شرب الكثير من الكحول
· اضطراب العصب الوجهى، وضعف الحس الجلدى، تركيبة الحساسية

· الأمراض الجلدية والتهاب الجلد التأتبي والبشرة الحساسة
· الخصوص لعمليات جراحية في الوجه تحتوى على معادن،
· حشوة السилиكون والبلاستيك بسبب الكسر أو إعادة تشكيل الوج

لا يجوز استخدامه

- يرجى عدم استخدام هذا الجهاز إذا كنت تتناول الأدوية التالية
- أدوية لعلاج السرطان
 - أدوية لعلاج مشاكل القلب أو ضغط الدم
 - أدوية لعلاج القلق والكتاب والفصام
 - الأقى وحالات المصح العقلية الأخرى
 - أدوية لعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو الصدفية
 - أدوية لعلاج الالتهابات البكتيرية أو الفطرية أو الفيروسية
 - الأدوية المستخدمة لخفيف الألم والتورم بما في ذلك تلك المستخدمة في علاج الأمراض الالتهابية والروماتيزمية
 - أدوية لعلاج الحساسية
 - دواء لعلاج المalaria أو الوقاية منها
 - دواء لعلاج السرعر
 - أدوية لمشاكل المعدة
- إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان بإمكانك استخدام هذا الجهاز أم لا، يرجى طلب المساعدة الطبية.

القواعد التي يجب اتباعها

- يجب على الأشخاص الذين هم في الظروف التالية استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام هذا الجهاز:
- أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن حالة بشرتهم عند استخدامه
 - المصابون بأورام خبيثة
 - المصابون بأضطرابات في القلب
 - مرض السكري والأمراض الطرفية الأخرى التي تسبب خطورة اضطراب الدورة الدموية، مما يؤدي إلى ضعف الإدراك
 - درجة حرارة الجسم أعلى من 38 درجة مئوية (أثناء الحمى) مثل: فترات الالهاب الحاد مع شدة الأعراض (التعب، قشعريرة، تقلبات في ضغط الدم، الخ) مثل: فترات الضعف الجنسي
 - أولئك الذين يحتاجون إلى الراحة
 - عندما يكون ضغط دمك غير طبيعي وتعاني من الألم الحصبي في الوجه
 - اضطراب شديد في الدورة الدموية
 - هشاشة العظام، وكسر العمود الفقري، والألتواء، والشد العضلي، وغيرها الحالات المرتبطة بالألم الحاد.
 - أولئك الذين أجروا عمليات جراحية

· أجريت أي رعاية جراحية مثل إعادة تسطيح الجلد بالليزر أو التقطير الكيميائي العميق في منطقة العلاج أثناء الأشهر الثلاثة الماضية أو في عملية الشفاء من هذه الجراحة · وجود حشوات دائمة في منطقة العلاج من فضلك استشير الطبيب قبل البدء في العلاج · إذا كان لديك حشوات مؤقتة في منطقة العلاج · وكان لديك البشرة الهشة أو شديدة الجفاف بسبب تناولك دوائياً حالياً · أو المستحضرات العشبية أو الفيتامينات أو المكمالت الغذائية

لا يجوز استخدامه

- يرجى عدم استخدام هذا الجهاز في المناطق والظروف التالية:
- عند الإصابة بأي من الأمراض الحادة
 - حيث يكون الجلد أرق (فوق العظام)
 - عندما يكون ضغط دمك غير طبيعي
 - حيث الشيباب
 - وره خبيث
 - حول مأخذ العين
 - مرض الدرن
 - بالقرب من القلب
 - شامة بارزة
 - أمراض الدم
 - المناطق التي تم إجراء عمليات التجميل فيها
 - مرض الحمى
 - الجفون، نقل العيون
 - الأمراض المعدية
 - تفاحة آدم
 - الأمراض الحشوية
 - داخل الفم والمهبل والأغشية المخاطية وغيرها.
 - جروح في جلدك
 - المناطق التي تم إجراء زراعة الأسنان فيها
 - التأليل الفيروسي

ملاحظة



لا يجوز استخدام

لا تستخدم الجهاز في درجات حرارة عالية

في حالة احتمال اشتعال النار في الجهاز وارتفاع حرارته، مما يتسبب

في حدوث حروق للمستخدمين.

يجب عدم السماح للرضع والأطفال باستخدام هذا الجهاز أو السماح

له باللعب به لتجنب الإصابات أو الحوادث

لأن قم بتوصيل أو فصل كابل USB بأيده مبتلة لتجنب الإصابات

أو الصدمات الكهربائية.

لأن قم باتلاف كابل USB أو معالجته أو ثنيه أو سحبه أو لفه بأي

شكل من الأشكال.

لأنه ينبع أشياء ثقيلة فوق كابل USB، أو تستخدم أشياء أخرى لربط

كابل USB لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو حدوث ماس كهربائي

لأكواب، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق، وما إلى ذلك.

لأنه ينبع كابل USB بلف حول قدميك أو رفلك لتجنب الإصابات

أو الحوادث.

يجب عدم وضع الجهاز في الحمام أو الأماكن الرطبة لتجنب

الصدمات الكهربائية أو الحرائق.

لأنه ينبع هذا الجهاز في الماء لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو حدوث

ماس كهربائي في الجهاز، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق، وما إلى ذلك.

لأنه ينبع الشعلة الشمسية لفترة طويلة أو

بالقرب من موقد أو أماكن أخرى ذات درجة حرارة عالية لتجنب نشوب

حرائق أو عطل بالجهاز.

لأنه ينبع عطل بالجهاز يلمس المعدن

لتجنب عطل الجهاز أو وقوع إصابات

يجب عدم السماح للرضع والأطفال باستخدامه أو اللعب به

لتجنب الإصابات أو الحوادث.

احفظه بعيداً عن متناول الرضع والأطفال، وبعيداً عن الأسرة لتجنب

الإصابات أو الحوادث.

ملاحظة

- تجنب حمامات الشمس أو استخدام كراسى الاستلقاء للتسميس أثناء أو بعد استخدام الجهاز.
- استخدم فقط منتجات التبييض أو العطور بعد 24 ساعة على الأقل من استخدام الجهاز.

ملاحظة

تحذيرات كهربائية

إذا لم يتم استخدامه لفترة طويلة، يرجى شحنه على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، سوف يؤدي التفريغ الكامل لفشل البطارية.

لا تستخدم الجهاز إذا تم العثور على تلف، مثل علية متشققة أو كسور في الجهاز وأرأس تكنولوجيا مكسورة أو محظمة أو بشاحن ضعيف، وما إلى ذلك.

لأنه ينبع سلك الطاقة حول الشاحن أثناء التخزين، مما قد يؤدي إلى تلف الكابل والفشل المبكر.

لا تسحب سلك الطاقة بالشدة أو تثنّيه بزاوية حادة جدًا أو تخزنه ملفوقة حول الجهاز، مما يتسبب في تلف الكابل والفشل المبكر.

لا تستخدمه إذا كان شاحن الطاقة أو الجهاز ساخناً جدًا، لا تتضغط على الأزرار أو شاشة العرض بقوة كبيرة.

لا تقم بفكك الجهاز، لا تستخدم الملحقات غير المعتمدة.

احفظه بعيداً عن الفم والعينين عند الاستخدام.

يجب أن يتوافق التخلص من الكسولة مع القوانين واللوائح الخاصة بي أي بلد أو منطقة حيث أنت تقع.

استخدم فقط أسلاك الطاقة ومصادر الطاقة المعتمدة التي يقدمها النظام.

لأنه ينبع توصيل كابل شحن USB بأجهزة أخرى

أسماء الأجزاء

يشمل:

1. قاعدة الشحن

2. قبضة

3. رأس التقنية:

أ. رأس التكنولوجيا الذهبية

ب. رأس التكنولوجيا الخضراء



4. جبل القوة



التحكم في شدة الجهاز

◀ اضغط على الزر الأيمن لزيادة الكثافة

▶ اضغط على الزر الأيسر لتقليل الكثافة

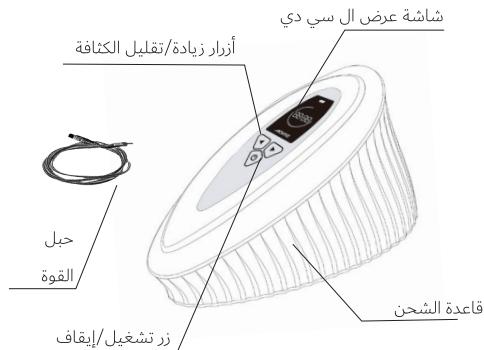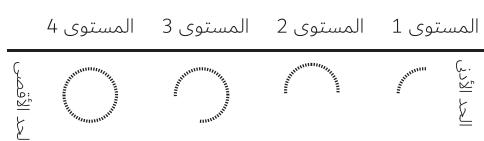

تعليمات التشغيل

قبل العلاج، قم بإجراء اختبار الجلد

يرجى التأكيد من اتباع الخطوات التالية عند استخدامه لأول مرة لتجنب مشاكل الجلد.

● ملاحظة

إذا كانت هناك حرارة غير طبيعية، أو أحمرار، أو أكزيما، أو حكة، أو تهيج، أو أي شيء آخر غير طبيعي في منطقة الاختبار، فيرجى إيقاف الاختبار على الفور.
يرجى عدم استخدام الجهاز في حالة حدوث خلل في الجلد.

تنظيف بشرتك

استخدم الصابون لغسل الجزء الداخلي من ذراعيك ثم جففه بالمنشفة.

قم بإجراء اختبار على الجانب الداخلي من الذراع وفقاً لتعليمات العلاج التالي ٤-١ ويوصى بمضي الشدة إلى أعلى مستوى أثناء الاختبار يمكنك البدء في استخدامه في حالة عدم وجود تشوهات في الجلد (احمرار وحرارة) تحدث خلال 24 ساعة.

عمليات العلاج

- تحضير منطقة العلاج: إزالة جميع المحوهارات مثل الأقراط والقلائد وما إلى ذلك من جميع أنحاء منطقة العلاج.
- تنظيف منطقة العلاج: أزيل المكياج وتأكد من أن الجلد هناك جاف ونظيف.



بعد العلاج


● صيانة الجهاز

قم بفك رأس التكنولوجيا من الجهاز بعد العلاج
امسح جيّع أسطح رأس التقنية والجهاز بمنديل كحولية
بنسبة 96.75%
تأكد من أنّ الجهاز يتم شحنه بشكل صحيح عن طريق
التحقق مما إذا كان شريط البطارية على شاشة LCD يرتفع أم لا.

● استعادة البطارية المقلقة

يقوم الجهاز باستمرار بفحص سعة البطارية.
في بعض الحالات، بسبب الاستخدام غير السليم، قد
ينخفض مستوى البطارية إلى أقل من الحد الأدنى للسعة.
في هذه الحالة، يتم قفل البطارية تلقائياً لحماية نفسها.

يرجى اتباع الإجراءات التالية لإعادة تشغيل
البطارية من القفل:

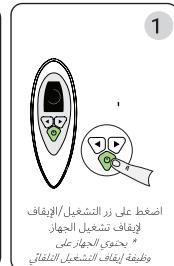

*الحزبيات موصى بهم لحرمانها بالذلة

● القواعد التي يجب اتباعها

wurth_{100.00}
الكبسولة للاستخدام مرة واحدة فقط.
عند الانتهاء من الرعاية، قم بإزالة الكبسولة
المستخدمة والتخلص منها.

المشاكل والحلول المشتركة

ينبغي استخدام الإرشادات التالية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في البداية لمحاولة حل أي مشاكل قد تتم مواجهتها أثناء استخدام الجهاز إذا واجهت مشاكل فنية أخرى ليست مدروجة هنا، يرجى الاتصال بالتابع أو دعم خدمة العملاء المحلي للحصول على المساعدة.

وصف رموز الخطأ

في حالة حدوث عطل، سيكون رمز الإخطار بالخطأ المعروضة على شاشة LCD. يصف الجدول التالي أنواع الأخطاء المحتملة و الإجراءات الموصى بها:

مقاسات	أسماء الأخطاء	رموز الخطأ
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من توصيل طاقة الشاحن. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 5 ثوانٍ، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعده إلى الشاحن. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، يرجى الاتصال بالدعم الفني. 	غيرمشحونة	E01
<ul style="list-style-type: none"> أخرج الجهاز من الشاحن. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، يرجى الاتصال بالدعم الفني. 	مبالغ فيه	E02
<ul style="list-style-type: none"> قم بإزالة الجهاز من الشاحن، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 5 ثوانٍ، وانتظر لمدة 10 ثوانٍ، ثم أعده إلى الشاحن. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، يرجى الاتصال بالدعم الفني. 	كشف فشل البطارية	E03
<ul style="list-style-type: none"> أوقف البرنامج وأطفئ الجهاز. تأكد من عدم وجود أي أجسام معدنية متصلة بالجهاز أو بالقرب منه وابدا العلاج مرة أخرى. إذا استمر ظهور هذه الرسالة، يرجى الاتصال بالدعم الفني. 	فشل المحرك	E04
في حالة حدوث عطل في الطاقة، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل/الإيقاف لمدة 5 ثوانٍ، وأوقف تشغيل الجهاز ثم اتصل بالدعم الفني.	مشكلة الطاقة	E05
اتصل بالدعم الفني	عطل في PF وحدة	E06

مشاكل	أسباب محتملة	حلول
بطارية فارغة	اشحن الجهاز لمدة 4 ساعات	
الفشل في البدء	قاس الطاقة الخاص بشاشة بالمقياس وشحن البطارية لمدة 4 ساعات مما يؤدي إلى عدم شحن البطارية.	
مفاتحة	قم بتنبيت كبسولة <small>WPS</small> جديدة على الجهاز أو لا تعمل.	قم بتنبيت كبسولة <small>WPS</small> الجديدة على الجهاز
توقف	اضغط على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى	اضغط عن طريق الخطأ على زر التشغيل/الإيقاف مرة أخرى

المواصفات الفنية

Wish Co. 60 بـ SYNCO كبسولة	جهاز		
من 12 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية	من 20 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية	درجة حرارة العمل ودرجة حرارة الشحن	ظروف العمل
20-50%	10-100%	الرطوبة النسبية	
من 700hPa إلى 1060hPa	من 700hPa إلى 1060hPa	الضغط الجوي	
من 12 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية	من 20 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية	درجة الحرارة للتذرير	شروط التذرير
20-50%	10-100%	الرطوبة النسبية	
من 700hPa إلى 1060hPa	من 700hPa إلى 1060hPa	الضغط الجوي	
5VA		100 فولت-240 فولت ~ 60/50 هرتز	الكهرباء
40- 10 درجة مئوية 15-60% درجة مئوية 1060hPa إلى 700hPa	40- 10 درجة مئوية 10 درجة مئوية 10-100% 1060hPa إلى 700hPa	درجة حرارة النقل / الرطوبة النسبية / الضغط الجوي	شروط نقل الجهاز

الكهرباء:

مدة النبض	تردد تكرار النبض	سعة تكرار النبض	
60 ميكروثانية	15.1 كيلو هرتز	5 فولت	قبضة
	92.5 هرتز	في بم في الثانية	رأس التكنولوجيا

رموز الخطأ	أسماء الأخطاء	مقاسات
E07	إشارة غير صحيحة لسعة البطارية	السعة المتباعدة غير معروفة، لذا يرجى الاتصال بالدعم الفني
E08	فراغة غير صحيحة لجوهر WishPro	استبدال WishCo. 60 الكبسولة
E09	مجموعاً سبب الشحن	آخر الجهاز من الشاحن وأعد شحنته بعد أن يبرد
E10	فارغ	ال kapsule غير صالحة للقيمة

التوثيق واللوائح

فئات



شاهين - جهاز من الدرجة الثانية
قبضة - تعمل بالطاقة الداخلية



الهيدر، رأس التيار، WishPro ESSENCE - חלקי מס' 106

مستوى للماء:

- الشاهن IP50-

- قبضة IP63-

- IP65- رئيس التكنولوجيا

ميزة السلامة:

علامة CE الموجودة على عبوة رئيس التكنولوجيا
يشير فقط إلى المكونات الإلكترونية في رئيس التكنولوجيا،
وأنها لا تشمل مواد التجميل في رئيس التكنولوجيا.

IEC 60601-1-11 • IEC 60601-1-6 •

IEC 60601-2-10 • IEC 62304-

IEC 60601-2-57 • IEC 62471-

IEC 62366 • أستراليا/نيوزيلندا

الصفحة الرئيسية/الأعضاء 0-1-3200

يمكن CSA C22.2 601.1-M90/ IEC 60601-1-2 الإصدار الرابع

EMC

CISPR 11- الإصدار الرابع

• آي إيه سي 2-3-61000

FCC

FCC ID:ZAI-SYNOIAWISHA01

الجزء 15 من قواعد (FCC) - الجزء الفرعى B والجزء الفرعى C

الجزء 18 من قواعد (FCC).

قبضة، رئيس التكنولوجيا، وجوهـر BF - أجزاء من فئة

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC:

تشغيل الجهاز بخضع للشروط التاليـين:

(1) يجب ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار

(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل محتمـل

أو تداخل قد يؤدي إلى تشغيل غير طبيعي.

التحذيرـات: قد تؤدي التغييرـات أو التعديلـات

الـتي لم يواافق عليها الطـرف المـتوافق مـسـاحة

إـلى إـبطـال سـلـطة المستـخدمـينـ في تـشـغـيلـ الجـهاـزـ

مـلاحظـةـ وـفقـاـ لـلـجـزـءـ 15ـ مـنـ قـوـاعـدـ (FCC)ـ هـذـاـ جـهاـزـ

تم اختبارـهـ وـوجـدـ أـنـهـ مـطـابـقـ لـلـشـرـطـوـنـ التـيـ تـتـطـلـعـلـهـ الـأـجهـزـهـ الـرـقـمـيـةـ

مـنـ الـفـلـةـ Bـ هـذـهـ الـقـيـودـ مـصـمـمـةـ لـتـقـيـيـرـ الـحـمـاـيـةـ ضـدـ

الـتـدـاخـلـ الضـارـ لـلـمـنـشـآـتـ فـيـ الـمـنـطـقـةـ السـكـنـيـةـ الـعـلـاجـ الـمـطـلـوـبـةـ

يـولـدـ هـذـاـ جـهاـزـ طـاقـةـ تـرـدـ لـاسـلـكـيـ وـيـسـتـخـدـمـهـ وـيـشـعـهـاـ،ـ وـإـذـ لـمـ

يـتمـ تـركـيـبـهـ وـاستـخـدـامـهـ وـفـقاـ لـلـلـيـلـ الـتـعـلـيـمـاتـ،ـ فـقـدـ يـتـسـبـبـ فـيـ

حدـوثـ تـدـاخـلـ ضـارـ فـيـ الـاتـصـالـ الـلـاسـلـكـيـ.

وـعـ دـلـلـ،ـ لـيـسـ هـنـاكـ ماـ يـضـمـنـ عـدـمـ حدـوثـ تـدـاخـلـ

فـيـ تـقـيـيـرـ مـعـيـارـ.ـ إـذـ تـسـبـبـ الـجـهاـزـ فـيـ حدـوثـ تـدـاخـلـ ضـارـ فـيـ

اسـتـقـيـالـ إـشـارـاتـ الرـادـيوـ وـالـتـلـفـيـزـيونـ وـالـتـيـ يـمـكـنـ تـحـدـيـدـهـاـ

عـنـ طـرـيـقـ إـيقـافـ التـشـغـيلـ الـجـهاـزـ وـتـشـغـيلـهـ؛ـ

يـتمـ تـشـجـعـ الـمـسـتـخـدـمـينـ عـلـىـ تـصـحـيـحـ التـدـاخـلـ

وـذـكـرـ بـاتـخـادـ وـاحـدـ أـوـ أـكـثـرـ مـنـ التـابـيـرـ الـتـالـيـةـ:

— إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موضعه

— زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز

الـاستـقـيـالـ

— قـمـ بـتـوصـيـلـ جـهاـزـ بـمـقـبـيسـ دـائـرـةـ مـخـتـلـفـ عـنـ

الـذـيـ يـتـصـلـ بـهـ جـهاـزـ الـاستـقـيـالـ.

— استـشـرـ الـبـائـعـ أـوـ فـنـيـ الرـادـيوـ/ـالـتـلـفـيـزـيونـ الـمـتـمـرـسـ

لـلـحـصـولـ عـلـىـ الـمـسـاعـدـةـ

مـلاحظـةـ:

فـيـ بـعـضـ الـأـماـكـنـ،ـ قـدـ يـتـدـاخـلـ جـهاـزـ مـعـ

استـقـيـالـ إـشـارـاتـ الرـادـيوـ.

مخاطر Gold TeH

1. قد يؤدي وضع الأقطاب الكهربائية بالقرب من منطقة الصدر إلى زيادة خطر الرجفان القلبي.
2. قد يؤدي التشغيل بالقرب من معدات العلاج بوجات الراديو القصيرة أو الميكرويف إلى عدم استقرار في خرج التحفيز.

معايير أقطاب Gold TeH

قطب مطي بالذهب – Gold 997 – قطر خارجي 3.2 مم

وفقاً للجزء 15 من قواعد FCC: تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع الشروط التي تطلبها الأجهزة الرقمية من الفئة B. تم تصميم هذه القيود لتوفير حماية كافية ضد التداخلات الضارة للمنشآت في المنطقة السكنية.

يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها ويشعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً لدليل التعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في الاتصالات الراديوية.

ومع ذلك، ليس هناك ما يمكنه عدم حدوث تداخل في ثبيت معين. إذا تسبب الجهاز في حدوث تداخل ضار في استقبال إشارات الراديو والتلفزيون والتي يمكن تحديدها عن طريق إيقاف التشغيل للجهاز وتشغيله، فقد يحاول المستخدمون تصحيح التداخل عن طريق انحصار واحد أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيهه أو تغيير موضع هوائي الاستقبال
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز والاستقبال

- توصيل الجهاز بمقبس دائرة مختلف عنه الذي يتصل به جهاز الاستقبال
- استئجار البائع أو خبير الراديو/التلفزيون للحصول على المساعدة

Synoia ليست مسؤولة عن أي تداخل راديوي أو اتصالات ناتج عن الجهاز قد تؤدي للتغيرات أو التعديلات غير المصرح بها للجهاز إلى إبطال الضمان.